
nuance audio

Télécommande Plus

Configuration guidée Télécommande Plus
Processus de configuration

La télécommande Remote Plus est utilisée pour activer et configurer vos lunettes. Elle vous guide dans le processus de configuration, vous permet de choisir votre langue préférée et vous accompagne dans un rapide étalonnage personnalisé afin que tout soit parfaitement adapté à vos besoins.

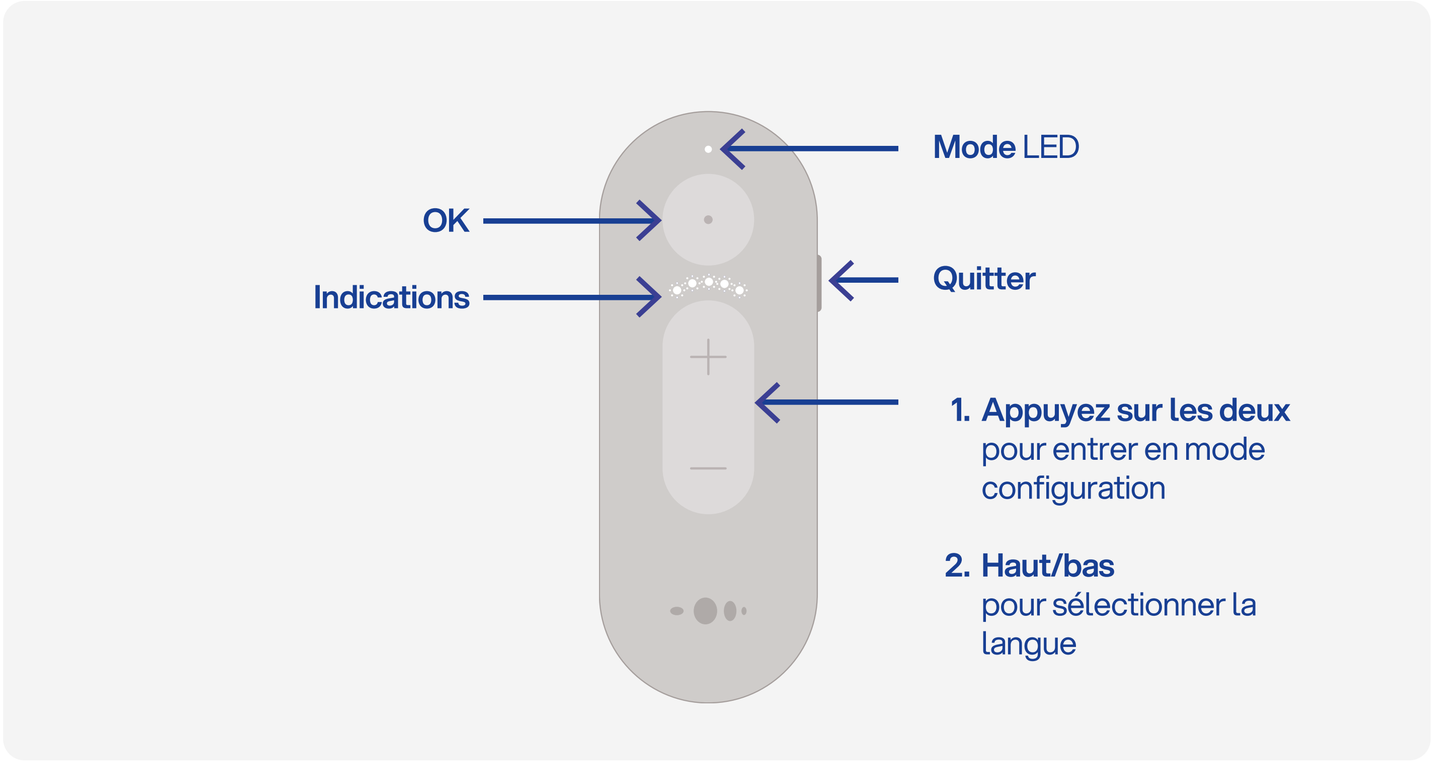

Configuration guidée Télécommande Plus
Processus de configuration

Préparez-vous

1. Les lunettes et la télécommande Remote Plus sont appairées

2. Les lunettes sont activées et portées

3. Pièce calme

Options d'appairage

1. *Pack pré-appairé*
2. *Appairage effectué par un conseiller en magasin*
3. *Appairage effectué par l'utilisateur à domicile*

Entrer en mode configuration

1. Appuyez et maintenez les boutons +/-

Les lunettes mesurent le bruit environnemental
pour continuer

Sélectionner la langue

1. Langues disponibles à l'écoute

2. Faites défiler avec +/-
3. Confirmez avec le bouton du haut
4.

Des indications sonores sont utilisées comme retour acoustique lors de la calibrage

Calibrage

1. Lunettes :
   « Répétez après moi : 1, 2, 3, 4 »

2. Utilisateur : « 1, 2, 3, 4 »

3. Continuer…

- *Des indications sonores sont utilisées*
  lors de la calibrage


- *La voix utilisateur est utilisée pour la*
  calibrage de la propre voix

Terminé


1. Configuration terminée une fois que suffisamment de données ont été collectées

Interface utilisateur Télécommande Plus

Appairage et configuration de la monture

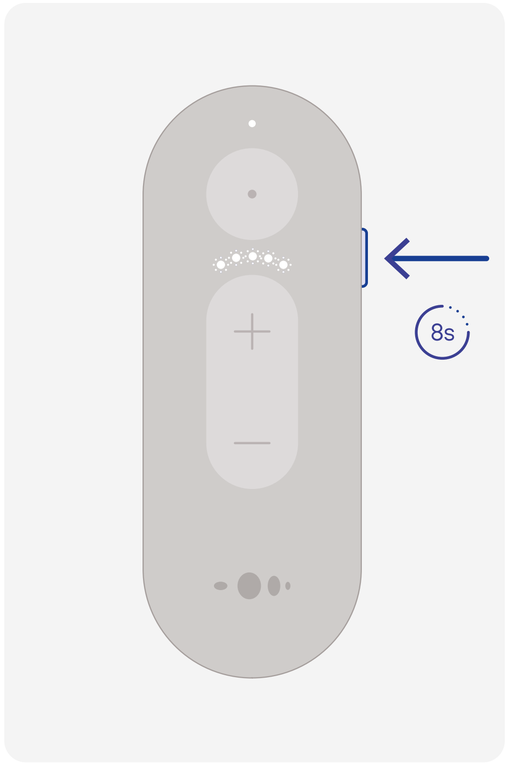


Appairage
Retirez la languette de la batterie de la télécommande avant de continuer. Lorsque les lunettes sont allumées, appuyez longuement sur le bouton de volume « **+**» ou « **-**» sur la monture jusqu'à ce que la LED bleue clignote. Ensuite, **appuyez sur le bouton latéral** et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes.

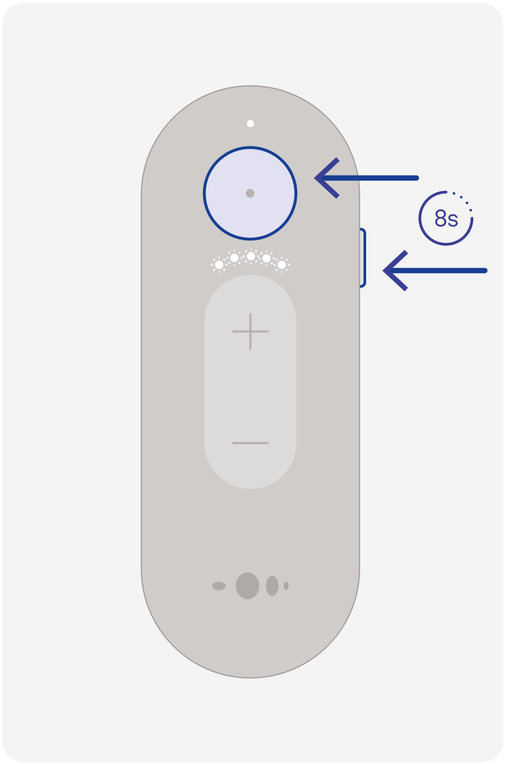


Restauration des paramètres d'usine
Appuyez sur le bouton supérieur et le bouton latéral. Maintenez les deux enfoncés pendant 8 secondes.

Interface utilisateur Télécommande Plus


Appairage et configuration de la monture

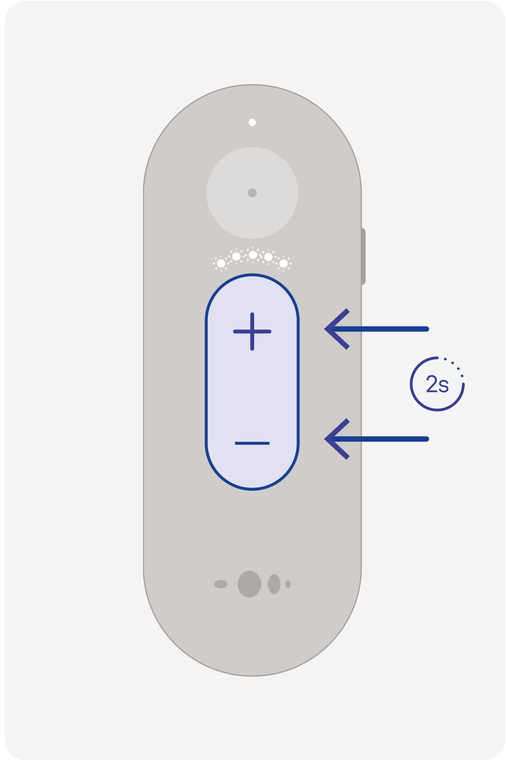

Entrer en mode configuration
Appuyez simultanément sur (+) et (-) pendant 2 secondes.

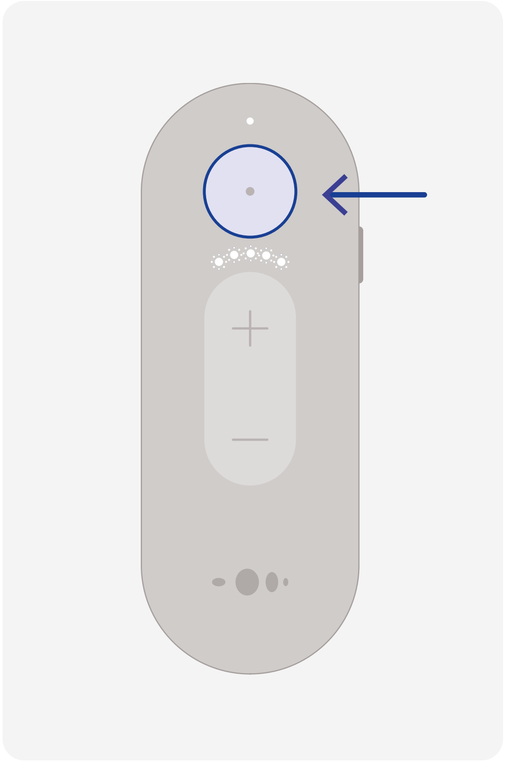


OK
Appuyez sur le bouton du haut

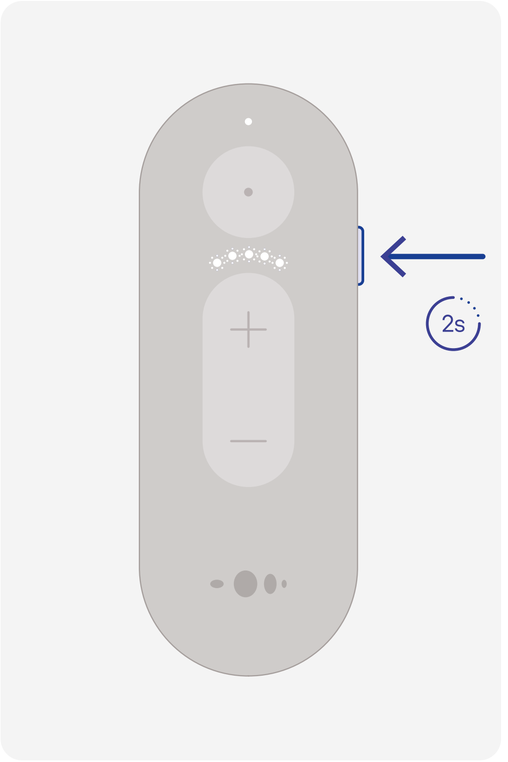


Quitter la configuration
Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Interface utilisateur Télécommande Plus

Configuration de la monture

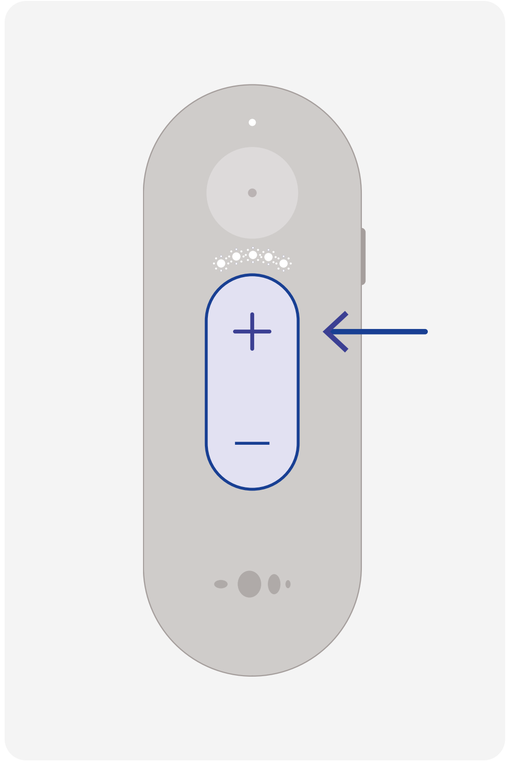


Langue suivante
Appuyez sur (+)

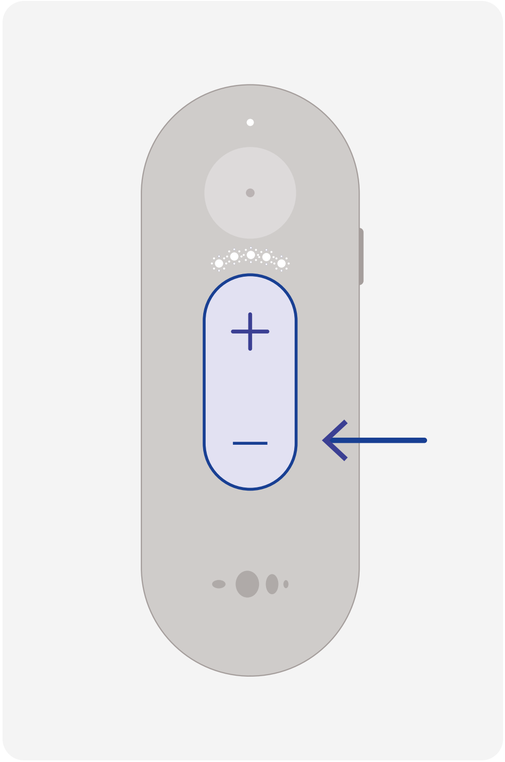


Langue précédente
Appuyez sur (-)

Interface Télécommande Plus
Écoute

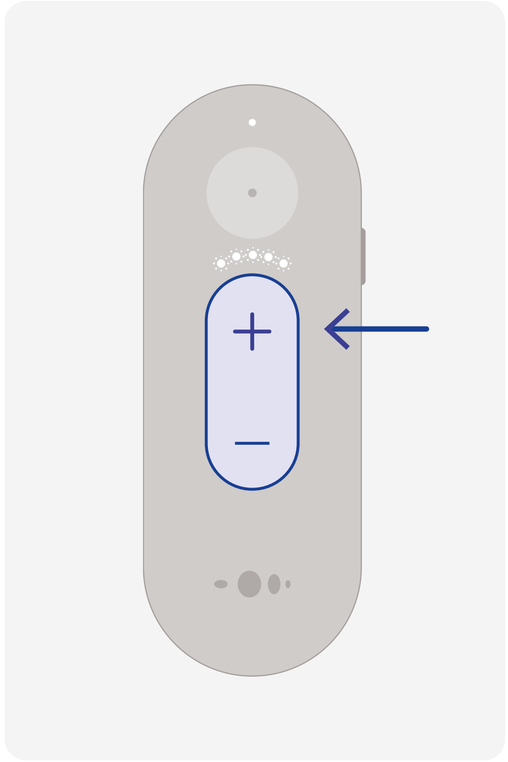


Augmenter le volume
Appuyez sur (+)

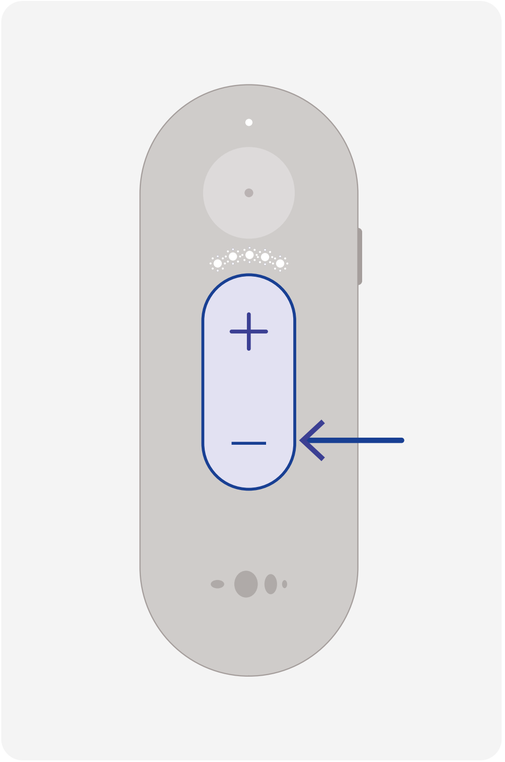


Baisser le volume
Appuyez sur (-)

Interface utilisateur Télécommande Plus
Écoute

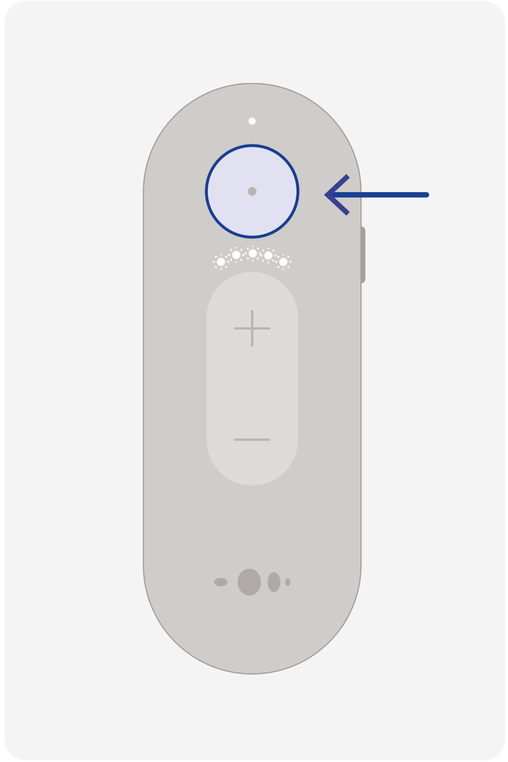


Changer le mode audio
Appuyez sur le bouton du haut

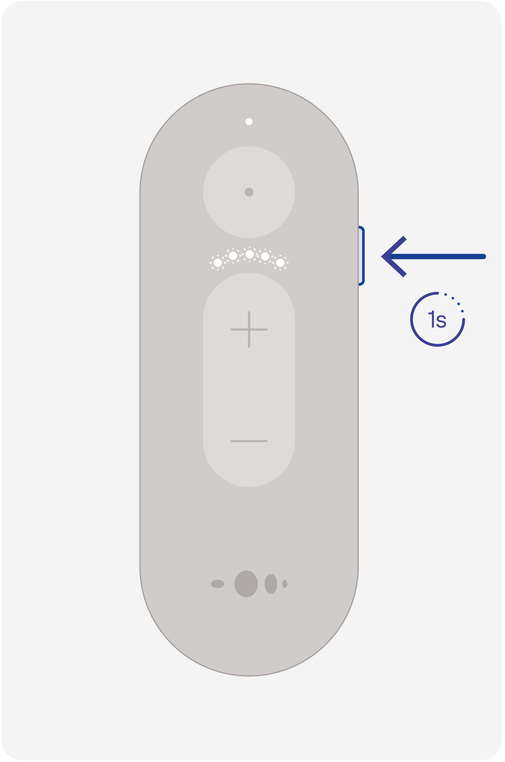


Passer au préréglage suivant
Appuyez sur le bouton latéral
et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

Interface utilisateur Télécommande Plus
Appelez

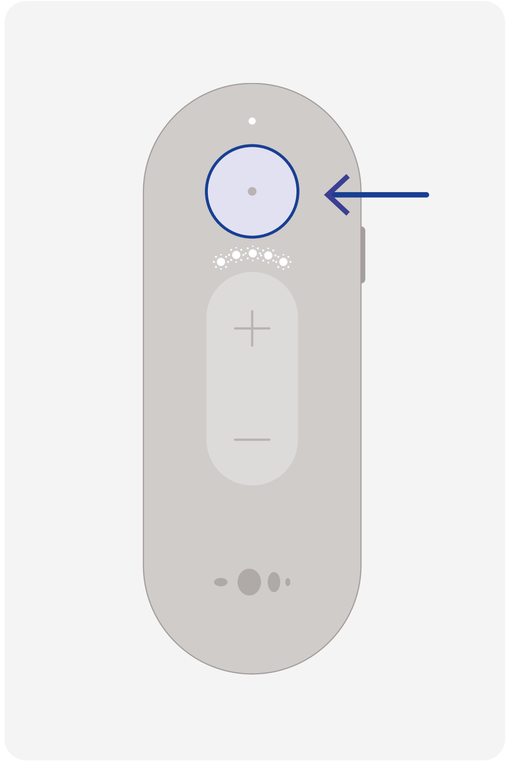

Répondre à l'appel
Appuyez sur le bouton du haut

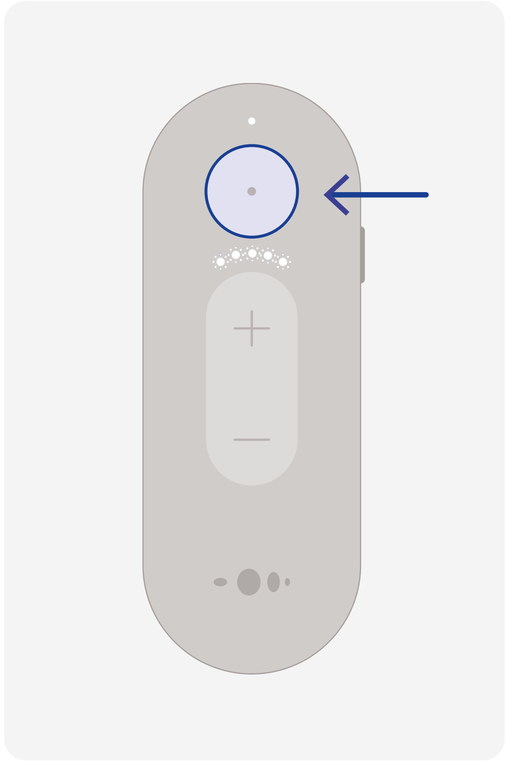

Terminer l'appel
Appuyez sur le bouton du haut

nuance audio

in tune with life

Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes, veuillez suivre ce lien

Voir les instructions d'utilisation